




Beemoo·CARE

Hot/Cold Breast Therapy Compression 2-pack

A soothing aid for potential problems that may arise during breastfeeding. By providing either cooling or warmth, they help increase blood circulation in the breast, which reduces tenderness and pain.

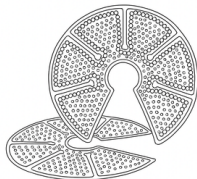

WARNING! Do not use during an ongoing infection. Consult your doctor before use if you are unsure.

USAGE:

Cold: Place in the freezer for about 4 hours before planned use. Remove from the freezer and place on the breast with the included soft pad between the compression and the breast.

Heat (option 1): Place in the microwave and heat according to the instructions below:

- 700 WATTS: 16 seconds
- 1000 WATTS: 13 seconds
- 1250 WATTS: 11 seconds

Heat (option 2): Place in hot water up to 80°C (176°F) for 10–15 minutes.

Cleaning: Wash with warm water and soap.



Beemoo · CARE

Ett lindrande hjälpmedel för eventuella problem som kan dyka upp vid amning. Genom att avge kyla eller värme hjälper de att öka blodcirkulationen i bröstet vilket dämpar ömhet och smärta.

WARNING! Använd inte vid pågående infektion. Rådfråga din läkare före användning om du är osäker.

ANVÄDNING:

Kyla: Placera i frysen ca 4 timmar innan planerad användning. Plocka ut ur frysen och placera på bröstet med den medföljande mjuka dynan mellan kompressionen och bröstet.

Värme (alt 1): Placera i mikrovågsugnen och värm enligt nedan hänvisning:

- 700 WATTS: 16 sekunder
- 1000 WATTS: 13 sekunder
- 1250 WATTS: 11 sekunder

Värme (alt 2): Placera i varmt vatten upp till 80°C (176°F) i 10-15 minuter.

Regöring: Tvätta av med varmt vatten och tvål.



Beemoo · CARE

Et lindrende hjelpemiddel for eventuelle problemer som kan oppstå ved amming. Ved å gi kulde eller varme bidrar de til å øke blodsirkulasjonen i brystet, noe som lindrer ømhet og smerte.

ADVARSEL! Ikke bruk ved pågående infeksjon. Rådfør deg med lege før bruk dersom du er usikker.

BRUK:

Kulde: Legg i fryseren i ca. 4 timer før planlagt bruk. Ta ut av fryseren og legg på brystet med den medfølgende myke puten mellom kompressen og brystet.

Varme (alternativ 1): Plasser i mikrobølgeovnen og varm opp etter anvisningene nedenfor:

- 700 WATT: 16 sekunder
- 1000 WATT: 13 sekunder
- 1250 WATT: 11 sekunder

Varme (alternativ 2): Plasser i varmt vann opptil 80°C (176°F) i 10–15 minutter.

Rengjøring: Vask med varmt vann og såpe.



Beemoo · CARE

Et lindrende hjælpemiddel til eventuelle problemer, der kan opstå under amning. Ved at afgive kulde eller varme hjælper de med at øge blodcirkulationen i brystet, hvilket dæmper ømhed og smerte.

ADVARSEL! Brug ikke ved igangværende infektion. Kontakt din læge før brug, hvis du er i tvivl.

BRUG:

Kulde: Læg i fryseren i ca. 4 timer før planlagt brug. Tag ud af fryseren og placer på brystet med den medfølgende bløde pude mellem kompressen og brystet.

Varme (mulighed 1): Placer i mikrobølgeovnen og varm op efter nedenstående anvisning:

- 700 WATT: 16 sekunder
- 1000 WATT: 13 sekunder
- 1250 WATT: 11 sekunder

Varme (mulighed 2): Placer i varmt vand op til 80°C (176°F) i 10-15 minutter.

Rengøring: Vask med varmt vand og sæbe.



Beemoo · CARE

Rauhoittava apuväline mahdollisiin ongelmiin, joita voi ilmetä imetyksen aikana. Kylmyyden tai lämmön avulla ne edistävät verenkiertoa rinnassa, mikä vähentää arkuutta ja kipua.

VAROITUS! Älä käytä, jos sinulla on käynnissä oleva tulehdus. Kysy lääkäriltäsi ennen käyttöä, jos olet epävarma.

KÄYTTÖ:

Kylmä: Aseta pakastimeen noin 4 tuntia ennen suunniteltua käyttöä. Ota pakastimesta ja aseta rinnalle käyttäen mukana tulevaa pehmeää tyynyä kompression ja rinnan välissä.

Lämpö (vaihtoehto 1): Lämmitä mikroaaltouunissa seuraavan ohjeen mukaan:

- 700 WATTIA: 16 sekuntia
- 1000 WATTIA: 13 sekuntia
- 1250 WATTIA: 11 sekuntia

Lämpö (vaihtoehto 2): Aseta kuumaan veteen (enintään 80°C / 176°F) 10–15 minuutiksi.

Puhdistus: Pese lämpimällä vedellä ja saippualla.



Beemoo · CARE

Eine lindernde Hilfe bei möglichen Problemen, die beim Stillen auftreten können. Durch Kälte oder Wärme wird die Durchblutung in der Brust angeregt, was Empfindlichkeit und Schmerzen lindert.

WARNUNG! Nicht bei bestehender Infektion verwenden. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie unsicher sind.

ANWENDUNG:

Kälte: Ca. 4 Stunden vor der geplanten Anwendung ins Gefrierfach legen. Aus dem Gefrierfach nehmen und auf die Brust legen, wobei das mitgelieferte weiche Kissen zwischen Kompresse und Brust platziert wird.

Wärme (Variante 1): In die Mikrowelle legen und gemäß den folgenden Anweisungen erwärmen:

- 700 WATT: 16 Sekunden
- 1000 WATT: 13 Sekunden
- 1250 WATT: 11 Sekunden

Wärme (Variante 2): In heißes Wasser (bis zu 80°C / 176°F) für 10-15 Minuten legen.

Reinigung: Mit warmem Wasser und Seife abwaschen.



@beemoo_scandinavia



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100013
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100013
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact